


STIMULAN®

Bullet Mat and Introducer

Innovación para su estrategia
de gestión de infecciones

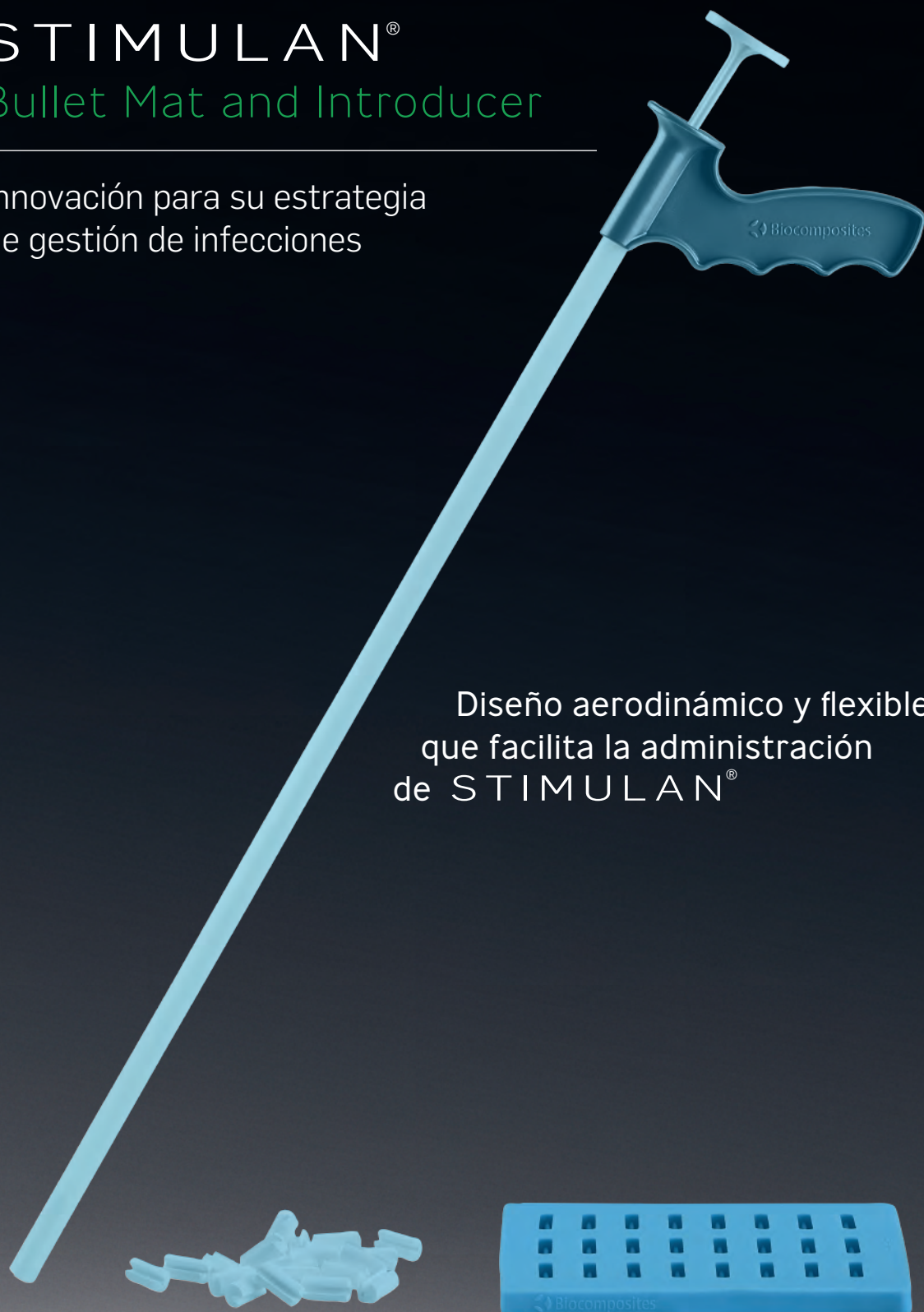

Diseño aerodinámico y flexible
que facilita la administración
de STIMULAN®

STIMULAN[®]

Bullet Mat and Introducer

Rellena los canales medulares rápida y fácilmente

STIMULAN es un portador de antibióticos de sulfato de calcio realmente absorbible, diseñado específicamente para complementar su espacio muerto y las estrategias de gestión de infecciones.¹

- ✓ la única matriz de calcio aprobada para su uso en huesos y tejidos blandos
- ✓ aprobado para mezclarse con vancomicina, gentamicina y tobramicina
- ✓ se puede aplicar directamente en sitios infectados y no infectados

El nuevo dispositivo innovador STIMULAN Bullet Mat and Introducer facilita la administración del producto en las zonas de difícil acceso. El molde de balas moldea balas alargadas con una ranura a un lado para reducir el riesgo de presión en la zona del defecto.

La forma aerodinámica y flexible del Introducer se puede insertar profundamente en el canal fresado o espacio vacío. El obturador permite empujar las balas en la zona quirúrgica. Las balas pueden prepararse en dos diámetros de 7mm y 9mm en función de cada necesidad.



STIMULAN[®]

Técnica de preparación


Elija el tamaño de la bala y el Introducer para ajustarse a la zona quirúrgica

Diámetro de la Bala	Diámetro externo del Introducer	Diámetro de fresado mínimo	Longitud máxima (de punta a punta)	Referencia
7mm	9mm (Mango negro)	10mm	640mm	660-001
9mm	11mm (Mango gris)	12mm	480mm	

Siga las instrucciones de mezcla para **STIMULAN Rapid Cure 20cc**. Reemplace el molde de perlas con el molde de balas.


Técnica para precargar y usar el Introducer

1

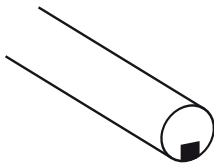


Asegúrese de que la pestaña de retención de la extremidad distal esté en posición, como se muestra en la imagen

2

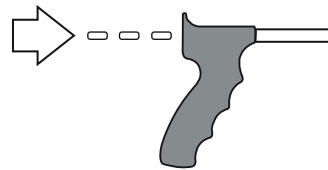


Saque el obturador e introduzca las balas al nivel requerido para llenar el espacio vacío

3

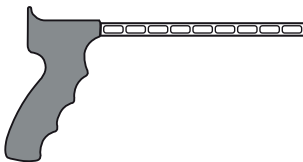


Transfiera el Introducer pre-cargado a la zona quirúrgica. Debe mantenerlo en posición horizontal

4

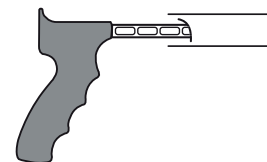

Inserte despacio el Introducer en la zona quirúrgica

5

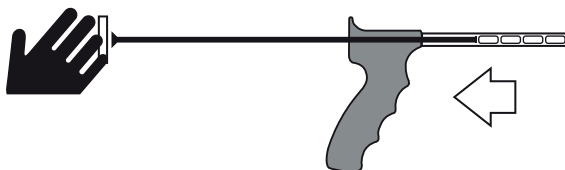

Inserte el obturador y aplique una presión positiva. Mantenga la presión positiva y tire hacia atrás del Introducer, dejando las balas de **STIMULAN** dentro del espacio vacío



Biocomposites Companion


Su guía técnica esencial para sacar el máximo provecho de STIMULAN - Todo en una sencilla aplicación.

Nuestra aplicación accesible proporciona toda la información necesaria para satisfacer las diferentes exigencias clínicas al usar STIMULAN con o sin antibióticos.

Desde consejos dados por cirujanos hasta videos de instrucciones, esta es la herramienta de soporte experto que necesita, justo a su alcance.

- ✓ Vídeos de instrucciones de preparación
- ✓ Tiempos de fraguado: resumen sencillo
- ✓ Principales consejos: consejos y eficacia demostrada para cirujanos
- ✓ FAQ: Preguntas y respuestas más frecuentes
- ✓ Gama de productos: productos disponibles

Para descargar Biocomposites Companion, simplemente escanee el código QR.

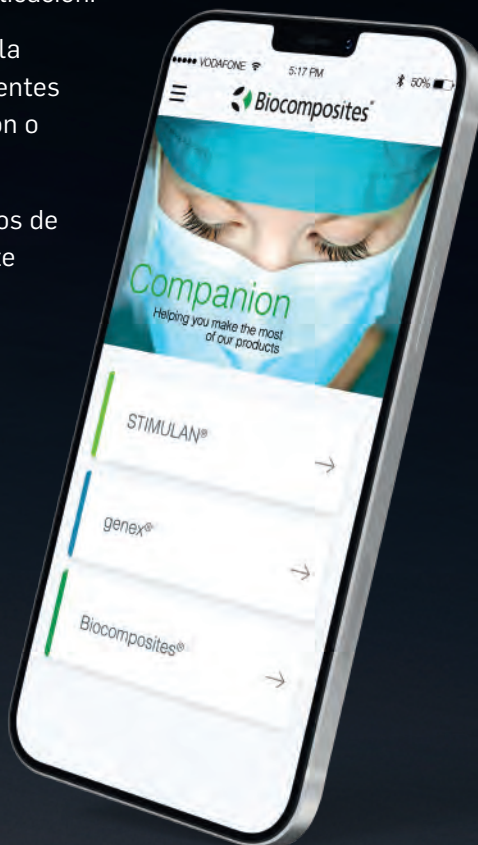

Referencias: 1. Biocomposites Ltd, STIMULAN Instructions for Use.

Siga las indicaciones y consulte las contraindicaciones, advertencias y precauciones en las instrucciones de uso. El uso concomitante de antibiótico local puede afectar el tiempo de fraguado, las características de absorción y/o la formación de hueso. Es responsabilidad del cirujano/profesional sanitario tener debidamente en cuenta los datos en la autorización de comercialización del medicamento para decidir si es apropiado para el paciente bajo su cuidado. Debe consultarse el Resumen de las Características del Producto correspondiente. El tipo y la dosis del medicamento también deben evaluarse en función de las circunstancias clínicas individuales de cada paciente.

Este catálogo puede contener el uso de STIMULAN y/o técnicas que van más allá de la autorización/aprobación actual concedida por la autoridad reguladora competente. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local.

©2022, Biocomposites, STIMULAN, Bringing Calcium to Life, Power to Transform Outcomes y Dry26 son marcas/marcas registradas de Biocomposites Ltd. Todos los derechos reservados. No está permitida la copia, reproducción, distribución o reedición sin el permiso expreso y por escrito del propietario, Biocomposites Ltd.

Patentes concedidas: GB2367552, EP 1204599 B1, US 6780391, EP 2594231 B1, US 8883063, CN ZL201210466117.X, GB2496710, EP 3058899 B1, US 10390954, US 10,588,748, CN ZL201610089710.5

Patentes pendientes: GB1502655.2, GB1704688.9, EP 18275044.8, US 15/933936, CN 108619579A