

3°™

PLACA CERVICAL
3 Grados de versatilidad



**Fijación constreñida, semi-constreñida
y no constreñida en un solo sistema**

MBA®


ORTHOFIX®
Spinal Implants

3^o™

PLACA CERVICAL

3 GRADOS DE VERSATILIDAD

fijación constreñida, semi-constreñida
y no constreñida en un solo sistema




La **Placa Cervical 3^o™** ha sido diseñada como soporte en la estabilización de la columna cervical de C2 a C7, en el tratamiento de:

- Enfermedades degenerativas del disco
- Espondilolistesis
- Estenosis vertebral
- Tumores
- Pseudoartrosis
- Deformidades
- Traumatismos
- Revisiones de cirugías previas; y otorgando al cirujano la mayor versatilidad en el manejo de la placa.

versatilidad

El diseño único de implantes e instrumental multifuncional de la **Placa Cervical 3^o** ofrece la precisión y versatilidad que permite al cirujano escoger entre tres tipos de montaje: constreñido, semi-constreñido y no constreñido.

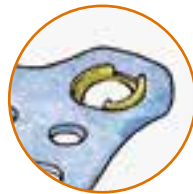

Montaje Constreñido

Fijación rígida con tornillos perpendiculares a la placa, utilizando una combinación de arandela (que guía la colocación del tornillo perpendicular a la placa) y de placa de bloqueo superior deformable (color bronce).



Montaje Semi-Constreñido

Traslación axial restringida del montaje, utilizando una placa de bloqueo superior dinámica (color azul).




Montaje No-Constreñido

Traslación axial sin restricciones del montaje (hasta 1 mm de traslación en la porción azul de la placa), utilizando una placa de bloqueo superior deformable (color bronce).

Fabricado por:




● seguridad

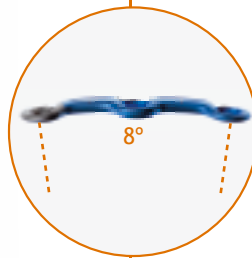

Las placas son pre-contorneadas con una curvatura de 8° y es posible su doblado intra-operatorio para su adaptación a los requerimientos anatómicos.



El diseño silueteado de la placa, las ranuras y su perfil reducido evitan lesionar las estructuras adyacentes.

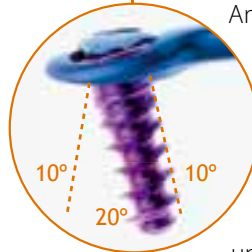

Amplia gama de tornillos auto-terrajantes. Para los montajes que no sean constreñidos, la inserción de los tornillos puede realizarse con un ángulo céfalo-caudal de hasta 20°.

En cualquiera de los montajes se utilizan placas de bloqueo superior que evitan el retroceso de los tornillos. La inserción de los tornillos con un ángulo medial de 6° reduce la posibilidad de arrancamiento. Si fuese necesario, existen disponibles tornillos de un diámetro superior para procedimientos de revisión en diferentes longitudes.



● simplicidad

- Taladrar, enroscar y atornillar con una sola pinza de sostén de placa/guía fija.
- Instrumentos codificados mediante colores para usar con los implantes correspondientes.
- Instrumentos modulares para flexibilidad intraoperatoria.



OFICINAS CENTRALES

Avda. Jardín Botánico 1345, Silos del Intra
33203 Gijón, Asturias, España
T: +34 985 195 505 F: +34 985 373 452
info@mba.eu www.mba.eu



DISTRIBUCIÓN España

DELEGACIÓN ANDALUCÍA

Juan Gris 16. 29006 Málaga
T: +34 952 040 300 F: +34 952 316 016

DELEGACIÓN ARAGÓN

Avd. Las Torres 24, planta 1ª, oficinas 3 y 4.
50008 Zaragoza
T: +34 976 461 092 F: +34 976 461 093

DELEGACIÓN ASTURIAS Y LEÓN

Avda. Jardín Botánico 1345. Silos del Intra
33203 Gijón, Asturias
T: +34 985 195 505 F: +34 985 373 452

DELEGACIÓN BALEARES

Carles Riba 1. 07004 Palma de Mallorca
T: +34 971 292 561 F: +34 971 298 601

DELEGACIÓN CANARIAS

León y Castillo 42, 5º B.
35003 Las Palmas de Gran Canaria
T: +34 928 431 176 F: +34 928 380 060

DELEGACIÓN CASTILLA LA MANCHA

Santa Bárbara, Local 2-4. 13003 Ciudad Real
T: +34 926 274 820 F: +34 926 230 552

DELEGACIÓN CASTILLA Y LEÓN

Democracia 1, bajo. 47011 Valladolid
T: +34 983 320 043 F: +34 983 267 646

DELEGACIÓN CATALUÑA

Sardenya 48, bajo 4. 08005 Barcelona
T: +34 93 224 70 25 F: +34 93 221 31 37

DELEGACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA

Alberique 27, esc. izq. 1º, puerta 3. 46008 Valencia
T: +34 96 382 66 02 F: +34 96 385 98 56

DELEGACIÓN EXTREMADURA

Francisco Guerra 14. 06011 Badajoz
T: +34 924 207 208 F: +34 924 242 557

DELEGACIÓN GALICIA

Gran Vía 161, 1º C. 36210 Vigo
T: +34 986 484 400 F: +34 986 494 804

DELEGACIÓN MADRID

Calle Cronos 63, 1º, 1. 28037 Madrid
T: +34 91 434 05 30 F: +34 91 433 76 99

DELEGACIÓN NORTECENTRO

(País Vasco, Cantabria, Navarra y La Rioja)
Músico Sarasate 2-4, bajo. 48014 Bilbao
T: +34 944 396 432 F: +34 944 271 382

DISTRIBUCIÓN Italia

GALLARATE

Via Amatore Sciesa 40A
21013 Gallarte (VA) Italia
T: +39 0331 777312 F: +39 0331 777248

DISTRIBUCIÓN Portugal

Rua Manuel Pinto Azevedo 74, 2º A. 4100 320 Porto
T: +351 226 166 060 F: +351 226 166 069

