



# Sistema de calentamiento forzado


La mejor opción para el manejo de la temperatura corporal y combatir la hipotermia



SEGURO

DE CONFIANZA

FÁCIL DE USAR

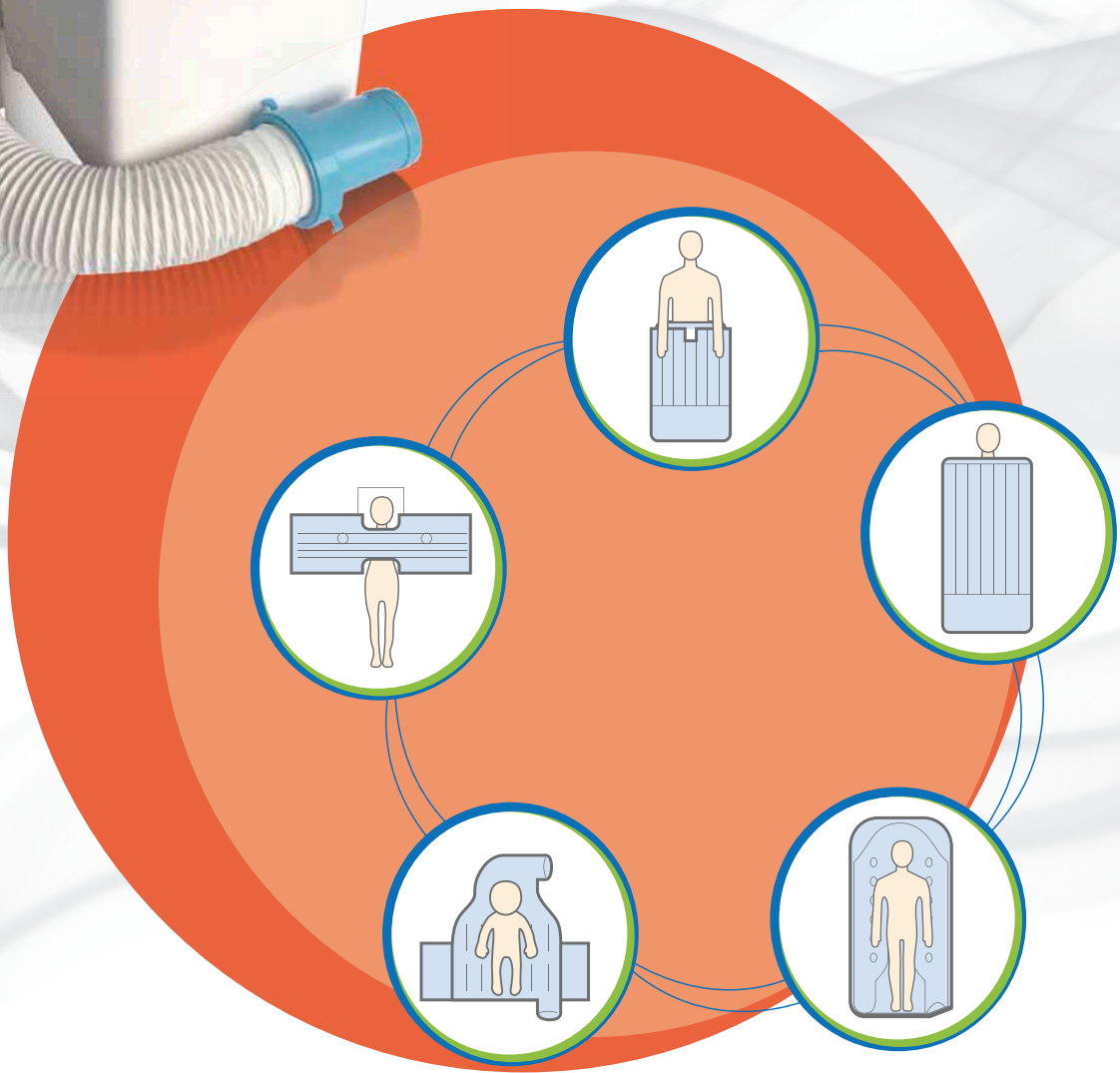

**BIOSER®**



## Sistema de calentamiento forzado



### SEGURO

#### Contador de tiempo

Contador de tiempo incorporado que hace fácil supervisar el uso para un buen mantenimiento preventivo.

#### Seguridad

Alarmas por altas y bajas temperaturas que aportan seguridad.

#### Aire limpio

El filtro de aire de 0,2 micras de alta eficiencia reduce las partículas en suspensión en el aire y garantiza una entrega de aire limpio.

### CARACTERÍSTICAS

#### Interfaz avanzada

Con 4 selecciones de temperatura de un solo toque (ambiente, 32°C, 38°C, 43°C) mostradas en lectura digital grande para satisfacer todas las necesidades de terapia.

#### Detección de temperatura

La detección de la temperatura del extremo de la manguera asegura una precisa entrega de la temperatura del aire.

#### Pequeño y ligero

La unidad de calentamiento es de pequeño tamaño y libera espacio de trabajo. El peso ligero hace que el transporte y la preparación sea más fácil.

#### No hace ruido

La unidad de calentamiento es silenciosa y se puede colocar convenientemente debajo de la mesa de operaciones, la cabeza o el pie final.

### ESPECIFICACIONES

**Dimensiones:** H28cm x D22cm x W22cm

**Peso:** 4.5 kg

**Nivel de ruido relativo:** 55 dBA

**Temperatura de funcionamiento:**

High: 43° ± 3°C (109.4° ± 5.4°F)

Med: 38° ± 3°C (100.4° ± 5.4°F)

Low: 32° ± 3°C (89.6° ± 5.4°F)

**Clasificación del producto:**

110-120 VAC, 60 Hz, 10 A

220-240 VAC, 50 Hz, 8 A

**Filtro:** 0.2 µm Filtro de alta eficiencia, 500-1000 horas

**Estándares:** IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-1-8, IEC 80601-2-35

## DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS

### Mantas de Calentamiento Intraoperatorias


#### Parte superior del cuerpo

Model: IOB-003



#### Parte inferior del cuerpo

Model: IOB-002

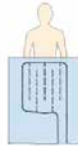

#### Torso

Model: IOB-001



#### Acceso múltiple

Model: IOB-008



### Mantas de calentamiento por debajo del cuerpo

#### Manta bajo paciente pediátrica

Model: IOB-005



#### Manta bajo paciente pediátrica grande

Model: IOB-009



#### Manta bajo paciente Columna

Model: IOB-010




#### Manta bajo paciente Litotomía

Model: IOB-011



#### Manta bajo paciente cuerpo entero


Model: IOB-006

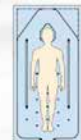

### Mantas de calentamiento pediátricas


#### Parte inferior del cuerpo

Model: IOB-012

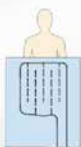

#### Pediátrica grande

Model: IOB-014

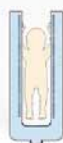

#### Pediátrica cuerpo entero

Model: IOB-007




#### Manta bajo paciente pediátrica

Model: IOB-005



#### Manta bajo paciente pediátrica grande

Model: IOB-009

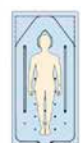

### Mantas de calentamiento postoperatorias

#### Adulto cuerpo entero

Model: IOB-004



#### Pediátrico cuerpo entero

Model: IOB-007



### Otras mantas de calentamiento


#### Cath Lab

Model: IOB-015



#### Acceso quirúrgico

Model: IOB-016

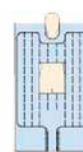

## OFICINAS CENTRALES

Avda. Jardín Botánico 1345, Silos del Intra  
33203 Gijón, Asturias, España  
T: +34 985 195 505 F: +34 985 373 452  
info@mba.eu

# BIOSER<sup>®</sup>

## DISTRIBUCIÓN España

### ÁREA CENTRO NOROESTE

#### DELEGACIÓN ASTURIAS

Avda. Jardín Botánico 1345, Silos del Intra  
33203 Gijón (Asturias), España  
T: +34 985 195 505 F: +34 985 373 452

#### DELEGACIÓN CANARIAS

León y Castillo 42, 5º B.  
35003 Las Palmas de Gran Canaria  
T: +34 928 431 176 F: +34 928 380 060

#### DELEGACIÓN CASTILLA Y LEÓN

Democracia 1, bajo. 47011 Valladolid  
T: +34 983 320 043 F: +34 983 267 646

#### DELEGACIÓN GALICIA

Gran Vía 161, 1º C, 36210 Vigo  
T: +34 986 484 400 F: +34 986 494 804

#### DELEGACIÓN MADRID

Calle Cronos 63, 1º, 1. 28037 Madrid  
T: +34 91 434 05 30 F: +34 91 433 76 99

### ÁREA LEVANTE

#### DELEGACIÓN CASTILLA LA MANCHA

Santa Bárbara, Local 2-4. 13003 Ciudad Real  
T: +34 926 274 820 F: +34 926 230 552

#### DELEGACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA

Alberique 27, Esc. Izq. 1º, Puerta 3, 46008 Valencia  
T: +34 96 382 66 02 F: +34 963 859 856

### ÁREA NORESTE

#### DELEGACIÓN ARAGÓN

Avd. Las Torres 24, Planta 1º, Oficinas 3 y 4  
50008 Zaragoza  
T: +34 976 461 092 F: +34 976 461 093

#### DELEGACIÓN BALEARES

Carles Riba 1. 07004 Palma de Mallorca  
T: +34 971 292 561 F: +34 971 298 601

#### DELEGACIÓN CATALUÑA

Sardenya 48-52, bajos, local 5. 08005 Barcelona  
T: +34 93 224 70 25 F: +34 93 221 31 37

#### DELEGACIÓN NAVARRA

San Raimundo 9, bajo. 31009 Pamplona  
T: +34 948 198 535 F: +34 948 177 416

#### DELEGACIÓN PAÍS VASCO Y CANTABRIA

Músico Sarasate 2-4, bajo. 48014 Bilbao  
T: +34 944 396 432 F: +34 944 271 382

### ÁREA SUR

#### DELEGACIÓN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

Avd. Reino Unido 7, local 2. 41012 Sevilla  
T: +34 954 934 792 F: +34 954 783 820

#### DELEGACIÓN ANDALUCÍA ORIENTAL

Juan Gris 16, 29006 Málaga  
T: +34 952 040 300 F: +34 952 316 016

#### DELEGACIÓN EXTREMADURA

Francisco Guerra 14. 06011 Badajoz  
T: +34 954 934 792 F: +34 954 783 820

## DISTRIBUCIÓN Portugal

#### DELEGACIÓN PORTUGAL

Rua Manuel Pinto Azevedo 74, 2ºA, 4100 320 Porto  
T: +351 226 166 060 F: +351 226 166 069