




Consiga un **BALANCE** adecuado Perfecto **CONTROL** de la reducción


Alcanza los tres objetivos básicos en el tratamiento de las fracturas de calcáneo: restaura la altura del talón, reduce su anchura para descomprimir los tendones peroneos y reproduce, de modo preciso, las superficies articulares sin comprometer los tejidos blandos circundantes.




- Diseño reducido y monolateral, más cómodo que un fijador circular.
- Elevada versatilidad, con capacidad de distracción y basculación.
- Mismo diseño para extremidad izquierda y derecha.
- Kit estéril listo para usar.

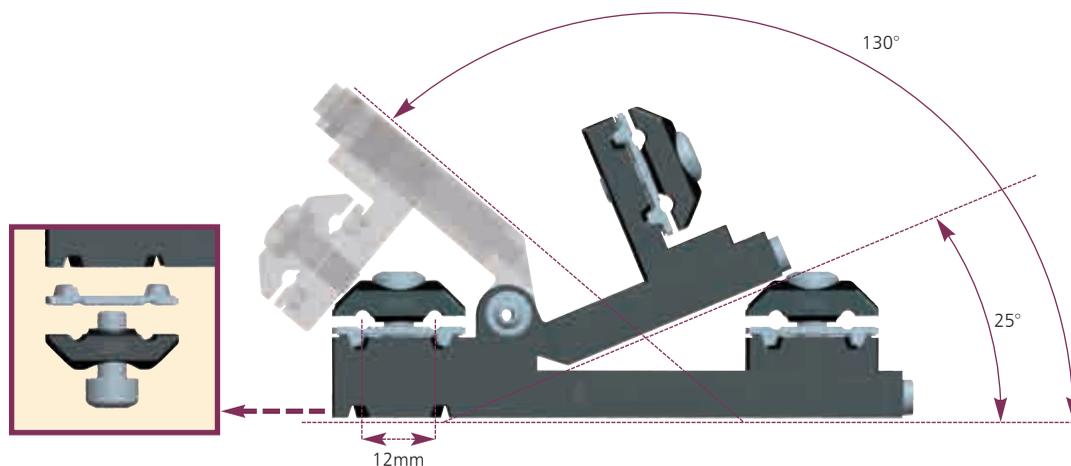

Unidades de **compresión-distracción** permiten la reducción de los fragmentos.

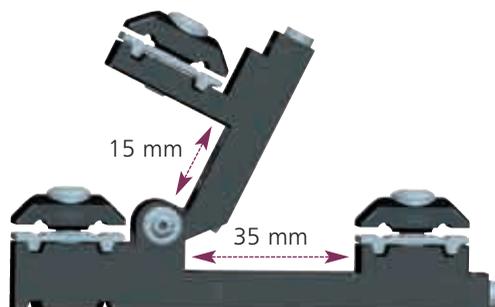

Cabezas basculantes posibilitan la implantación de los tornillos en ángulo.

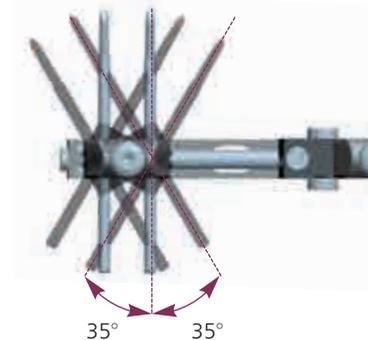

Caso clínico



Varón, 39 años




Intra-operatorio



Seguimiento a 7 meses

Caso clínico cortesía del Dr. B. Magnan. Departamento de Ortopedia y Traumatología de la Universidad de Verona, Italia.

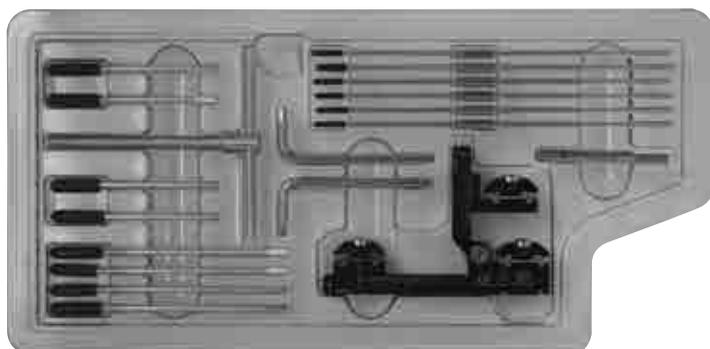

99-M1450 Kit MiniFijador de Calcáneo, estéril		
Referencia	Descripción	Cantidad
M145	Fijador externo para calcáneo	1
I0012	Llave Allen 3 mm	2
M210	Llave en T para la inserción de tornillos	1
M211	Acople para inserción de tornillos a motor	1
M224	Kit de plantilla para calcáneo	1
	Compuesto por:	
	- 6 Agujas	
	- 6 Agujas guía	
	- 6 Guías de tornillo	
M321	Tornillo 70/15	2
M315	Tornillo 70/25	2
M317	Tornillo 100/30	4